



BP Italia Tech 

DAWN-T

MultiLunghezza

Sistema laser a diodi per terapia

Modello: DawN-T



Il laser DAWN-T è il più versatile tra le apparecchiature laser sul mercato

Il laser a diodi DawnT 4 in 1 incorpora quattro diverse lunghezze d'onda (650nm, 808nm, 980nm e 1064nm/915nm) in un unico dispositivo. Questa soluzione innovativa consente ai professionisti di adottare un approccio non chirurgico più rapido ed efficace per il trattamento del dolore, la riduzione dell'infiammazione e la promozione della guarigione.

Applicazioni:

Capo Generale Mal di testa
Testa TMJ Testa Nevralgia Trigemina

Artrite della spalla
Lesione del legamento
della spalla
Spalla congelata

Lesione del
legamento del
braccio Muscoli
Infortunio del gomito
Generale

Hip/glute generale

Legamento del
ginocchio/menisco
Tendinite/bursite del
ginocchio
Ginocchio generale

General Caviglia
Foot General
Artrite del piede
Neuropatia del
piede


Cervicale generale
Artrite cervicale
Cervicogenic
Mal di testa
cervicale

Muscoli della
schiena
Artrite della
colonna vertebrale
Sciatica

Deformazione del
Neuropatia della mano
Lesione del legamento
della mano Dito
Generale Polso
Generale

Tendinite/bursite della
coscia
Generale di coscia

Tendinite del
polpaccio/Shinsplint
Vitello generale

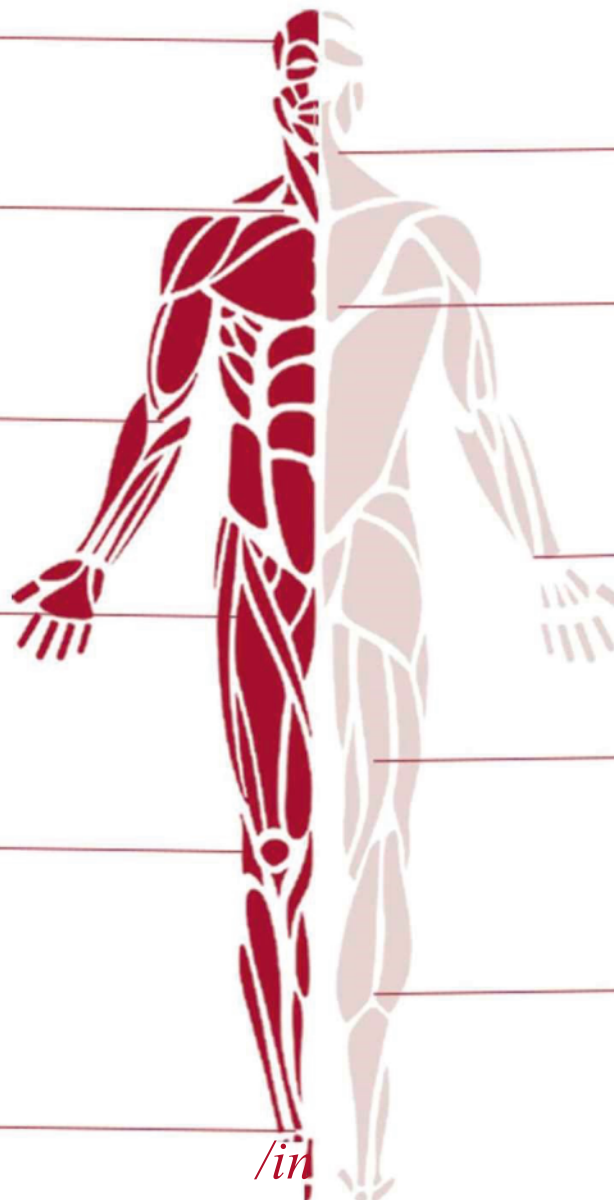

Vantaggi e benefici:

Tempi di trattamento più rapidi:

Ottenere risultati più rapidi con la perfetta miscela di potenza, lunghezze d'onda e pulsazioni, fornendo una dose terapeutica ottimale in meno tempo.

Facile da usare:

L'intuitiva interfaccia touchscreen consente di configurare senza sforzo protocolli di trattamento esperti in pochissimo tempo.



Comuni preimpostazioni:

Progettato e testato da medici, per i medici.



Migliore garanzia:

Godetevi una garanzia a vita su diodi e una garanzia del produttore di 3 anni per la massima tranquillità.



5 lenti a mano:

Sperimenta una versatilità di trattamento senza pari con la nostra gamma di lenti a fascio largo da 30 mm (lenti aperte non a contatto e lenti a contatto curve), lenti a contatto curve da 10 mm e lenti a tubo curvato da 5 mm.

Manipoli:

Il manipolo DawN-T è dotato di fino a 5 lenti, offrendo la flessibilità di regolare la larghezza del fascio per una versatilità senza pari.

Il manipolo DawN -T è dotato di fino a 5 lenti, offrendo la flessibilità di regolare la larghezza del fascio per una versatilità senza pari.



Specifiche tecniche:

Tipo laser	Sistema laser a diodi Daw -T
Modalità di funzionamento e	CW, Pulse;
Tasso di ripetizione	Fino a 20KHz 650nm 300mW 10%
Lunghezza d'onda e	808nm 8W 10%
Potenza massima	980nm 8W 10% 1064nm 8W±10% Laser a diodi rossi da 650 nm; Potenza < 5 mW

Fascio pilota	8 pollici touch screen
Modalità di controllo	Fibra ottica con tubo metallico; Con connettore SMA905;
Trasmissione Sistema	Manipolo ottico